


Denture Adhesive Ointment  
Formada adhesiva analgésica para la dentadura  
Onguent adhésif analgésique pour prothèse dentaire

# Bosworth® Cora-Caine®

## ORDERING INFORMATION INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES • INFORMACIÓN DE PEDIDOS

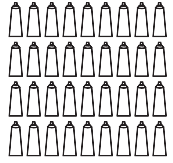

Ref 16621  
36 - 4g Tubes (1 Box)  
36 tubos de 4 g (1 caja)  
36 tubes de 4 g (1 boîte)




Ref 16624  
1 - 28g (1 oz.) Tube (Single Tube)  
1 de 28 g (1 oz.) Tubo (tubo sencillo)  
1 tube de 28 g (1 oz.) (tube unique)

For more information contact your dental dealer or:  
Veuillez nous faire parvenir vos questions en matière de santé de sécurité à:  
Por favor dirija preguntas salud y seguridad a:

**Bosworth Company**  
The Harry J. Bosworth Company  
7227 North Hamlin Avenue  
Skokie, IL 60076-3999 USA

DIN 00070254

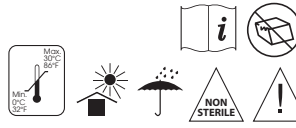


0214PR112


## Bosworth Cora-Caine Instructions For Use

Cora-Caine provides a secure fit by soothing tender ridges and relieving the discomfort of sore spots. Acting as a cushion between the denture and the tissue, Cora-Caine provides positive retention and enhanced stability. Cora-Caine is pink in color, has no smell or aftertaste, and remains effective up to 24 hours.

### PRIOR TO USE

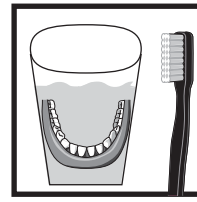


1. Clean and dry denture.

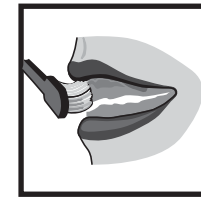


2. Thoroughly clean and rinse the patient's mouth.

### DIRECTIONS FOR USE ON UPPER DENTURES

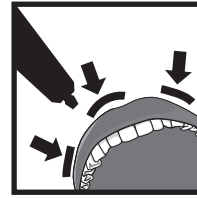


1. Flow a 1/4 inch (6mm) ribbon of Cora-Caine into the right, left and center ridge area of upper denture.

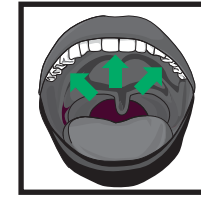


2. Replace the denture slowly and wipe away excess.

### DIRECTIONS FOR USE ON LOWER DENTURES

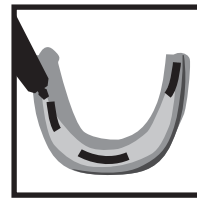

1. Flow a 1/4 inch (6mm) ribbon of Cora-Caine into the right, left and center ridge area of lower denture.

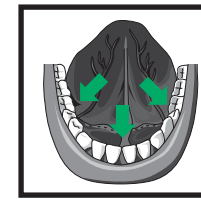

2. Replace the denture slowly and wipe away excess.

### CAUTIONS


- Prolonged use of this medication is not recommended as adjustment of the denture by your dentist is necessary to maintain good oral health. Do not exceed recommended dosage or use for more than 7 days unless directed by a dentist or doctor. Discontinue use and consult a doctor if sore mouth symptoms do not improve or if irritation worsens and swelling, rash, or fever develops.
- Patients with a known history of hypersensitivity to "caine" products should not use Cora-Caine®. Localized allergic reactions may occur after prolonged or repeated use. Do not use this product if you have a history of allergy to local anesthetics such as procaine, butacaine, benzocaine, or other "caine" anesthetics.
- Avoid contact with the eyes.
- Get medical help or contact a Poison Control Center immediately in the case of overdose or ingestion.
- Keep out of reach of children.

Active Ingredient = Benzocaine 16%


## Bosworth Cora-Caine Instrucciones de uso

Cora-Caine ofrece un ajuste seguro calmando los bordes sensibles y aliviando la molestia de los puntos doloridos. Al actuar como almohadilla entre la dentadura y el tejido, Cora-Caine ofrece una mayor estabilidad y una retención positiva. Cora-Caine es de color rosa, no tiene sabor ni olor y continúa haciendo efecto hasta 24 horas.

### ANTES DE SU USO

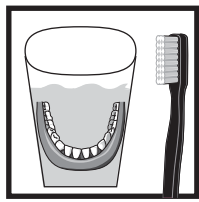


1. Limpie y seque la dentadura.

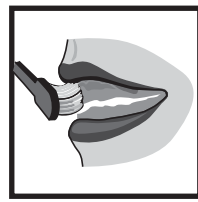


2. Limpie y enjuague concienzudamente la boca del paciente.

### INSTRUCCIONES DE USO EN DENTADURAS SUPERIORES

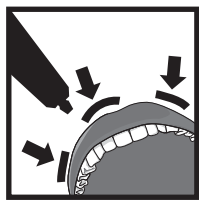

1. Coloque unos 6 mm (1/4 pulg.) de Cora-Caine en la área izquierda, central y derecha de la dentadura superior.

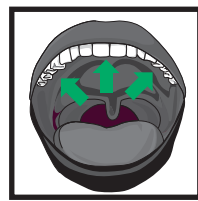


2. Vuelva a colocar la dentadura con cuidado y elimine el exceso de producto.

### INSTRUCCIONES DE USO EN DENTADURAS INFERIORES



1. Coloque unos 6 mm (1/4 pulg.) de Cora-Caine en la área izquierda, central y derecha de la dentadura inferior.

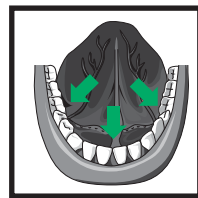

2. Vuelva a colocar la dentadura con cuidado y elimine el exceso de producto.

### PRECAUCIONES


- No se recomienda el uso prolongado de esta medicación, ya que es necesario que el dentista ajuste la dentadura para mantener una buena salud oral. No supere la dosis recomendada ni lo utilice durante más de 7 días, a menos que se lo indique un dentista o un médico. Interrumpa el uso y consulte a un médico si los síntomas de dolor en la boca no mejoran o si la irritación empeora y se desarrolla hinchazón, sarpullidos o fiebre.
- Pueden producirse reacciones alérgicas localizadas después de un uso prolongado o repetido. No utilice este producto si presenta un historial de alergias a anestésicos locales como procaina, butacaina, benzocaina u otros anestésicos compuestos de "caina".
- Evite el contacto con los ojos.
- Busque ayuda médica o póngase en contacto inmediatamente con un centro de tratamiento de intoxicaciones en el caso de sobredosis o ingestión.
- Mantenga este producto lejos del alcance de los niños.

Ingrediente activo = Benzocaína 16%


## Bosworth Cora-Caine Mode d'emploi

Cora-Caine fournit un ajustement sécurisé en apaisant les crêtes alvéolaires tendres et en soulageant le malaise des points douloureux. Le Cora-Caine fournit une rétention positive et une meilleure stabilité en servant de coussinet entre la prothèse dentaire et les tissus. Le Cora-Caine est rose, n'a pas d'odeur ou d'arrière-goût et reste efficace jusqu'à 24 heures.

### AVANT L'USAGE

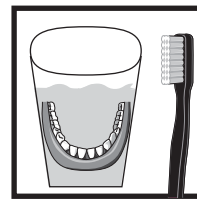


1. Nettoyer et sécher la prothèse.

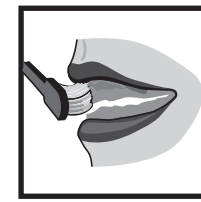


2. Nettoyer et bien rincer la bouche du patient.

### MODE D'EMPLOI POUR LA PROTHÈSE SUPÉRIEURE

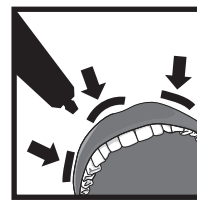

1. Faire couler un ruban de 6 mm (1/4 po) de Cora-Caine dans le creux droit, gauche et central de la prothèse supérieure.

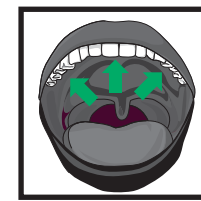


2. Remettre lentement la prothèse en place et essuyer tout excès.

### MODE D'EMPLOI POUR LA PROTHÈSE INFÉRIEURE



1. Faire couler un ruban de 6 mm (1/4 po) de Cora-Caine dans le creux droit, gauche et central de la prothèse inférieure.

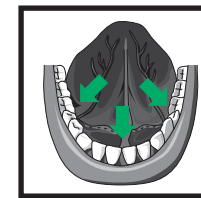

2. Remettre lentement la prothèse en place et essuyer tout excès.

### ATTENTION

- Un usage prolongé de ce médicament est déconseillé, étant donné que le dentiste devra effectuer un ajustement de la prothèse pour maintenir une bonne hygiène orale. Ne pas dépasser le dosage recommandé et ne pas utiliser pendant plus de sept jours, sauf si recommandé par le dentiste ou le médecin. Arrêter d'utiliser ce médicament et consulter un médecin si les symptômes de bouche douloureuse ne s'améliorent pas ou si l'irritation s'empire et si une enflure, une éruption cutanée ou une fièvre se développent.
- Les patients présentant des antécédents d'hypersensibilité aux produits à base de benzocaïne ne doivent pas utiliser Cora-Caine®. Des réactions allergiques localisées peuvent se produire après utilisation prolongée ou répétée. Ne pas utiliser ce produit en cas d'antécédents d'allergie à des anesthésiques locaux, tels que la procaine, la butacaine, la benzocaïne, ou d'autres anesthésiques "caines".
- Éviter tout contact avec les yeux.
- Obtenir de l'aide médicale ou contacter un centre antipoisons en cas de surdose ou d'ingestion.
- Garder hors de la portée des enfants.

Principe actif = Benzocaïne 16 %